



BG Аналогова везна за телесно тегло PSD

- 1 Колело за настройка
- 2 Скала с показания, макс. 150 kg

Обяснение на знаците:



Настоящата инструкция за употреба принадлежи към този уред. Тя съдържа важна информация за пускането в експлоатация и работата с уреда. Прочете изцяло тази инструкция за употреба. Неспазването на тази инструкция може да доведе до тежки наранявания или повреди на уреда.



ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ!


Тези предупредителни указания трябва да бъдат спазвани, за да се предотвратят евентуални наранявания на потребителя.

LOT

Партиден номер



Производител

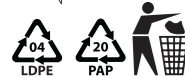

Символи за рециклиране / Кодове: Те служат за предоставяне на информация относно материала и правилната му употреба и рециклиране.

BG Указания за безопасност



Прочетете внимателно ръководството за експлоатация и в частност указанията за безопасност, преди да използвате уреда и запазете ръководството за експлоатация за по-нататъшно използване. Ако предавате уреда на трето лице, непременно предайте с него и това ръководство за експлоатация.

- Всяко лечение или диета за наднормено или поднормено тегло изисква квалифициран съвет от подходящ специализиран персонал (лекар, диетолог). Стойностите, определени с везната, могат да бъдат подпомагачи лечението/диетата.
- Опасност от преобръщане! Никога не поставяйте везната върху неравна основа. Никога не се качвайте само върху един ъгъл на везната. При теглене не стъпвайте от едната страна или върху ръба на везната.
- Опасност от подхлъзване! Никога не стъпвайте върху везната с мокри крака. Никога не стъпвайте върху везната с чорапи.
- Използвайте уреда само по предназначение съгласно инструкцията за употреба. При използване за други цели гаранцията става невалидна.
- Везната е предназначена за домашна употреба. Тя не е предназначена за професионална употреба в болници или други медицински учреждения.
- Не използвайте уреда, когато не функционира безупречно, падал е на земята или във вода, или е бил повреден.
- Везната има измервателен диапазон до 150 kg. Не претоварвайте везната.
- Винаги поставяйте везната върху здрава равна основа. Меки неравни повърхности не са подходящи за теглене и могат да доведат до грешни резултати.
- Поставете везната на място, на което температурата или влажността на въздуха не достигат екстремни стойности.
- Дръжте везната далеч от вода.
- Боравете внимателно с везната. Избягвайте удари или сътресения на везната. Не я оставяйте да пада.
- Стъпвайте внимателно върху везната. Не подскачайте и не скачайте върху повърхността за стъпване, тъй като това може да повреди претеглящия механизъм.
- Не се опитвайте да разглобявате уреда, в противен случай гаранцията ще бъде анулирана. Уредът не съдържа части, които подлежат на потребителска поддръжка или подмяна.
- В случай на неизправност не ремонтирайте уреда сами, тъй като това ще анулира гаранцията. Поверявайте извършването на ремонтите само на оторизиран сервис.

Окомплектовка на доставката

Моля, първо проверете дали уредът е окомплектован и дали няма никакви повреди.

В случай на съмнение не пускайте уреда в експлоатация и се обърнете към Вашия сервис.

В окомплектовката на доставката са включени:

- 1 medisana аналогова везна за телесно тегло PSD
- 1 кратка инструкция



Опаковките подлежат на рециклиране или могат да бъдат включени в кръговрата на суровините. Моля, изхвърляйте вече ненужния материал от опаковката по правилен начин. Ако при разопаковането забележите транспортна повреда, моля незабавно се свържете с Вашия търговец.



ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ

Внимавайте фолиото от опаковката да не попада в ръцете на деца. Съществува опасност от задушаване!

Предпоставки за правилни резултати от измерването

- Теглето се винаги при еднакви условия.
- Мерете се по едно и също време на деня.
- Стойте изправени и спокойни.
- Най-добре извършвайте меренето сутрин, след взимане на душ или вана, със сухи крака.

С резултатите от измерването, при последователно изпълнение, е възможна надеждна проверка на развитието на телесното тегло.

Претегляне

1. Винаги поставяйте везната върху стабилна и здрава основа. Всички четири крака трябва да имат контакт със земята. Неравен или мек под влияе отрицателно на точността на измерването.
2. Винаги се теглете на една и съща везна, на едно и също място и по едно и също време. Теглето се бездрехи, преди хранене, най-добре сутрин преди закуска.
3. Застанете с двата крака върху везната. Стрелката показва Вашето тегло върху скалата с показанията 2 в kg.

УКАЗАНИЕ

Ако везната е била транспортирана или местена, можете да я калибрирате като натиснете с крак леко върху повърхността за стъпване. Ако стрелката не стои на 0,0 kg, завъртете колелото за настройка 1 надясно или наляво, докато стрелката отново застане върху нулевата позиция. Повторете тази процедура.

Почистване и грижа

- Никога не използвайте агресивни почистващи препарати или твърди четки.
- Използвайте мек домакински почистващ препарат и от време на време избърсвайте повърхностите с влажна парче.
- В уреда не трябва да попада вода. Не потапяйте уреда във вода. Използвайте уреда отново, едва след като той е изсъхнал напълно.
- Не излагайте уреда на директна слънчева светлина, пазете го от замърсявания и влага.

Указание за изхвърлянето

Този уред не трябва да се изхвърля заедно с домашната смет. Металите подлежат на рециклиране или могат да бъдат включени в кръговрата на суровините. Изхвърлете уреда, който вече няма да използвате, в пункт за събиране във Вашия град, така че да може да бъде изхвърлен по екологичен начин. Потърсете информация от местната администрация или при Вашия търговец относно изхвърлянето.

Технически данни

Име и модел: medisana аналогова везна за телесно тегло PSD

Измервателен диапазон: до 150 kg

Деление: 500 g

Размери: 28,5 x 42,5 x 8,5 cm

Артикул №: 40461

EAN №: 4015588 40461 0

Условия за гаранция и ремонт

Вашият законови гаранционни права не се ограничават от нашата гаранция, представена по-долу. В случай на повреда, покритата от гаранцията, моля да се обърнете към Вашия специализиран магазин или директно към сервиса. Ако трябва да изпратите уреда за ремонт, моля да посочите дефекта и да приложите копие на касовия бон. При това важат следните гаранционни условия:

1. За продуктите medisana се предоставя гаранция от 3 години от датата на продажбата. При настъпване на гаранционен случай датата на продажбата се доказва с касов бон или фактура.
2. Повреди в резултат на дефекти в материалите или производствени грешки се отстраняват безплатно в рамките на гаранционния срок.
3. Предоставянето на гаранционна услуга не води до удължаване на гаранционния срок нито за уреда, нито за сменените части.
4. От гаранцията са изключени:
 - а) всички повреди, които са възникнали вследствие на неправилна експлоатация, напр. на неспазване на инструкцията за употреба.
 - б) повреди, които се дължат на ремонти или намеси от страна на купувача или неоторизирани трети лица.
 - в) повреди, които са възникнали при транспортирането от производителя до потребителя или при изпращането до сервиса.
 - г) резервни части, които подлежат на нормално износване.
5. Изключва се поемане на отговорност за причинени от уреда преки или косвени щети, дори и когато настъпилата повреда на уреда се покрива от гаранцията.



medisana GmbH,
Carl-Schurz-Str. 2, 41460 NEUSS, ГЕРМАНИЯ

В рамките на непрекъснатите продуктови подобрения си запазваме правото на технически и конструкционни промени.

Съответната актуална версия на тази инструкция за употреба можете да намерите на адрес <https://docs.medisana.com/40461>.
Информация за услугите можете да намерите тук:
www.medisana.com/servicepartners