

- 1 Ръкохватка
- 2 Функционален бутон (вкл./изкл./интензитет)
- 3 Избор на посока на въртене
- 4 Функционални светодиоди
- 5 Ролки за масаж
- 6 Извод за заряден кабел (задна защитна капачка)

Обяснение на знаците



ВАЖНО!

Неспазването на тази инструкция може да доведе до тежки наранявания или повреди на уреда.



ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ

Тези предупредителни указания трябва да бъдат спазвани, за да се предотвратят евентуални наранявания на потребителя.



ВНИМАНИЕ

Тези указания трябва да се спазват, за да се предотврати възникването на евентуални повреди по уреда.



УКАЗАНИЕ

Тези указания Ви дават полезна допълнителна информация за монтажа или за експлоатацията.



Клас на защита II



Партиден номер **IPX4** Защита от пръски вода

Производител

Окомплектовка на доставката

Моля, първо проверете дали уредът е окомплектован и дали няма някакви повреди. В случай на съмнение не пускайте уреда в експлоатация и се обърнете към Вашия търговец или към Вашия сервиз.

Към окомплектовката на доставката спадат:

- 1 **medisana AC 900**
- 1 USB кабел за зареждане
- 1 инструкция за употреба

Ако при разопаковането забележите транспортна повреда, моля незабавно се свържете с Вашия търговец.



ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ

Внимавайте опаковъчните фолиа да не попаднат в ръцете на деца! Съществува опасност от задушаване!



BG Указания за безопасност

Прочетете внимателно инструкцията за употреба, и в частност указанията за безопасност, преди да използвате уреда и запазете инструкцията за употреба за по-нататъшно използване. Ако предавате уреда на трето лице, непременно предайте също и тази инструкция за употреба.



- Уредът е предназначен само за лична употреба в затворени помещения, а не за търговски цели.
- Използвайте уреда само по предназначение съгласно настоящата инструкция за употреба. При използване за други цели гаранцията става невалидна.
- Избягвайте контакта на със заострени или режещи предмети.
- Не използвайте уреда, ако сте бременни.
- Лица със сърдечен пейсмейкър, изкуствени стави или електронни импланти трябва във всеки случай преди употреба на уреда да потърсят съвет от лекар.
- Не трябва да използвате уреда, ако страдате от едно или повече от следните заболявания или оплаквания: проблеми с кръвообращението, разширени вени, отворени рани, диабет, висока температура, сърдечни проблеми, контузии, кожни пукнатини, възпаление на вените, тумори, тромбоза, остеопороза, фрактури на гръбначния стълб или дискова херния.
- **Не** използвайте уреда върху следните места от тялото: глава, лице, предната страна на врата, гърди, корем, кости или стави (напр. лакът, коляно и др.), областта на бърбреците и гениталиите.
- Прекалено силен натиск при масаж с уреда може да доведе до наранявания!
- Необходимо е специално внимание, когато уредът се използва при, от или в близост до деца, болни и безпомощни лица.
- Този уред може да се използва от деца на възраст над 8 години, както и от лица с намалени физически, сензорни или умствени способности, или лица с недостатъчно опит и познания, ако те са под наблюдение и са били инструктирани относно безопасната работа и възникващите в резултат на това опасности.
- Децата не трябва да играят с уреда.
- Ако усетите болки или възприемате масажа като неприятен, прекъснете употребата и се консултирайте с Вашия лекар.
- Дръжте уреда далеч от горещи повърхности, влага и течности. Никога не хващайте уреда с мокри или влажни ръце, или докато стоите във вода. Не посягайте към уред, който е паднал във вода.
- Не покривайте уреда, когато е включен. Никога не го използвайте под одеяло или възглавница. Съществува опасност от пожар, електрически удар и нараняване.
- Никога не съхранявайте и не използвайте уреда до електрическа фурна или други източници на топлина.
- Не сядайте и не стъпвайте върху уреда.
- Не използвайте уреда заедно с други уреди.
- Не използвайте уреда преди лягане за сън. Масажът има стимулиращо действие и може да забави заспиването.
- Не заспивайте по време на използването на масажния уред върху себе си. Прекалено дълго приложение на едно и също място може да доведе до оплаквания и изгаряния.
- В случай на повреда не ремонтирайте уреда сами. Ремонт трябва да се извършва само от оторизиран специализиран търговец или съответно квалифицирано лице.
- Преди употреба проверявайте уреда за повреди. Уред с повреда не трябва да се пуска в експлоатация!
- Почистването и поддръжката от потребителя не трябва да се извършват от деца без надзор.

- Изключвайте уреда след всяка употреба.
- Не използвайте уреда непосредствено след ядене или употреба на алкохол, или когато сте изморени.
- Не оставяйте уреда да пада и не го излагайте на силни удари.
- Не използвайте уреда, докато обслужвате превозни средства или машини.
- Внимавайте кабелът да е разположен така, че да не представлява опасност от спъване. Той не трябва да се прегъва, притиска или усуква. Ако кабелът е повреден, той не трябва да се използва повече.
- Препоръчваме да зареждате напълно уреда най-късно на всеки 3 месеца, за да предотвратите дълбок разряд или повреда на батерията.
- Този уред съдържа батерии, които не подлежат на смяна.

Зареждане на батерията

Преди първата употреба заредете напълно батерията. Времето за зареждане възлиза на около 3,5 часа. С напълно заредена батерия уредът може да се използва ок. 3,5 до 5 часа. За зареждане свържете доставения USB кабел с извода на уреда **6** и подходящ електрически източник (5V прав ток, 2A). При правилно свързване (процес на зареждане) светодиодният пръстен **4** пулсира. Колкото по-затворен при това е светодиодният пръстен, толкова по-високо е състоянието на зареждане на батерията:

0-10% червени-ят светодиоди пулсира	11-25% светодиоди пулсира	26-50% светодиоди пулсира	51-75% светодиоди пулсира	76-95% светодиоди пулсира	100%





УКАЗАНИЯ

- **Уредът не може да се използва по време на процеса на зареждане.**
- **За зареждане не използвайте кабел, различен от включения в окомплектовката на доставката. Ако се нуждаете от резервен такъв, обърнете се към службата за работа с клиенти.**

Употреба

1. Включете уреда чрез натискане на функционалния бутон **2**. Уредът започва да работи с нисък интензитет, което се придружава от светване на половината светодиоден пръстен. Ако натиснете отново функционалния бутон **2**, уредът преминава към висок интензитет и целият светодиоден пръстен светва.
2. Вие можете да извършите масажа върху самите себе си или върху партньор. Движете уреда върху зоната от тялото, която трябва да се масажира. В зависимост от усещането може да упражнявате никакъв или лек натиск. Можете да търкаляте уреда по различни части на тялото, вижте „Примери за приложение“.
3. Чрез натискане на бутон **3** можете да смените посоката на въртене на ролките.
4. При масажа се не се концентрирайте твърде дълго върху едно и също място на тялото (макс. 1 минута), а сменяйте областта на масажа по-често по време на приложението.
5. Едно приложение не трябва да трае повече от 15 минути (след това време се извършва автоматично изключване). Използвайте уреда редовно, за да може да се установи положителното въздействие.
6. Ако искате да изключите уреда ръчно, натиснете функционалния бутон **2** в режим „висок интензитет“ още веднъж.

Примери за приложение

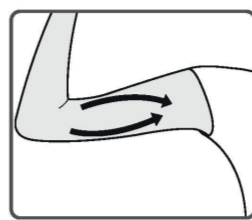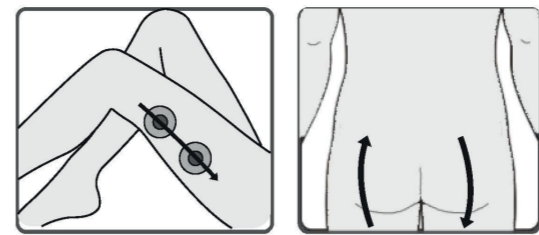

Точков масаж (дръжте уреда на едно място)

Водете масажора по продължение



УКАЗАНИЯ

- **Ако директното приложение върху кожата се усеща като неприятно, по време на приложението можете да поставите също кърпа за ръце между повърхността на кожата и уреда.**
- **Приложение напр. след къпане повишава стимулиращия кръвообращението масажен ефект, защото тялото вече е топло.**

Отстраняване на грешки

Ако уредът не може да се включи, проверете състоянието на зареждане на батерията (натиснете и задръжте функционалния бутон **2** за 3 секунди). При нужда заредете батерията. Ако установите ненормално поведение, миризми или продължаваща липса на функция, повече не употребявайте уреда и се обърнете към службата за работа с клиенти.

Почистване и грижа

- За почистването се уверете, че кабелът за зареждане **не** е свързан и оставете уреда да се охлади мин. 10 минути след употреба.
- Уредът трябва да се почиства с мека, при нужда леко навлажнена кърпа, евентуално с мек сапунен разтвор.
- Никога не използвайте агресивни почистващи препарати, разтворители, бензин, твърди четки или други подобни. Повърхността на уреда е чувствителна.
- Ролките за масаж **5** могат да се свалят и така могат да се почистват по отделно например с вода. След това поставете отново почистените ролки за масаж.
- Използвайте уреда отново едва тогава, когато е напълно подсушен и се уверете, че в уреда не може да проникне влага!
- Най-добре приберете уреда в оригиналната му опаковка и го съхранявайте на чисто и сухо място без слънчево лъчение.

Изхвърляне

Този уред не трябва да се изхвърля заедно с битовите отпадъци. Всеки потребител е задължен да предаде всички електрически или електронни уреди, без значение дали те съдържат вредни материали или не, в пункт за събиране в своя град или в търговската мрежа, за да могат те да бъдат изхвърлени по екологично безвреден начин. Във връзка с изхвърлянето се обърнете към Вашите местни органи или Вашия търговец.



Технически данни

Наименование и модел:	Антицелулитен масажен уред medisana AC 900
Захранващо напрежение:	5V==
Монтирана батерия:	литиево-йонна 2200 mAh
Работни условия:	0°C до +40°C, 20 до 85 % макс.относителна влажност на въздуха
Условия на съхранение:	-10°C до +60°C, 20 до 85 % макс.относителна влажност на въздуха
Приблизителни размери:	85 x 140 x 130 mm
Приблизително тегло:	345 g
Артикул №:	88542
EAN №:	40 15588 88542 6

В рамките на непрекъснатите продуктови подобрения си запазваме правото на технически и конструкционни промени.

Съответната актуална версия на тази инструкция за употреба можете да намерите на адрес www.medisana.com

Условия за гаранция и ремонт

В гаранционен случай, моля обърнете се към Вашия специализиран магазин или директно към сервиза. Ако трябва да изпратите уреда за ремонт, моля да посочите дефекта и да приложите копие на касовия бон.

При това важат следните гаранционни условия:

1. За **продуктите medisana** се дава гаранция от 3 години от датата на продажбата. Датата на продажбата трябва да бъде доказана в гаранционен случай чрез касов бон или фактура.
2. Повреди в резултат на дефекти в материалите или производствени грешки се отстраняват безплатно в рамките на гаранционния срок.
3. Предоставянето на гаранционна услуга не води до удължаване на гаранционния срок нито за уреда, нито за сменените части.
4. От гаранцията са изключени:
 - а)** всички повреди, които са възникнали поради неправилна употреба, напр. в резултат на неспазване на инструкцията за употреба.
 - б)** повреди, които се дължат на ремонти или намеси от страна на купувача или неоторизирани трети лица.
 - в)** транспортни повреди, които са възникнали по пътя от производителя до потребителя или при изпращането до сервиза.
 - г)** резервни части, които подлежат на нормално износване.
5. Изключва се поемане на отговорност за причинени от уреда преки или косвени щети, които са причинени от уреда, дори и тогава, когато повредата на уреда се покрива от гаранцията.



medisana GmbH
 Carl-Schurz-Str. 2
 41460 NEUSS
 DEUTSCHLAND/ГЕРМАНИЯ

Сервизният адрес може да намерите върху отделния приложен лист.