



TECHNIKER FM11 SHORT
Масажиращ Уред за Крака
с Въздушна Компресия

Инструкция за Използване

НИЕ СМЕ ТУК ЗА ДА ПОМАГАМЕ

Благодарим ви, че закупихте Масажиращ Уред за Крака с Въздушна Компресия. Тази инструкция е предназначена да ви даде указания и да ви предостави сигурност, че използването на този уред е безопасно и не представлява риск за потребителя. Всяка употреба, която не съответства на указанията, описани в тази инструкция може да доведе до невалидност на ограничената гаранция.

Моля, прочетете всички насоки преди да използвате уреда и запазете тази инструкция за справка. Този уред е предназначен само за използване в домакинството.


Този уред е покрит само с едногодишна ограничена гаранция. Покритието е предмет на ограничения и изключения. Вижте гаранцията за подробности

Съдържание на опаковката

- Масажиращ Уред за Крака
- Адаптер
- Инструкция за използване

Елементи

- Масажиращ Уред за Крака
- Маркуч въздушно налягане
- LCD екран
- Контролен панел

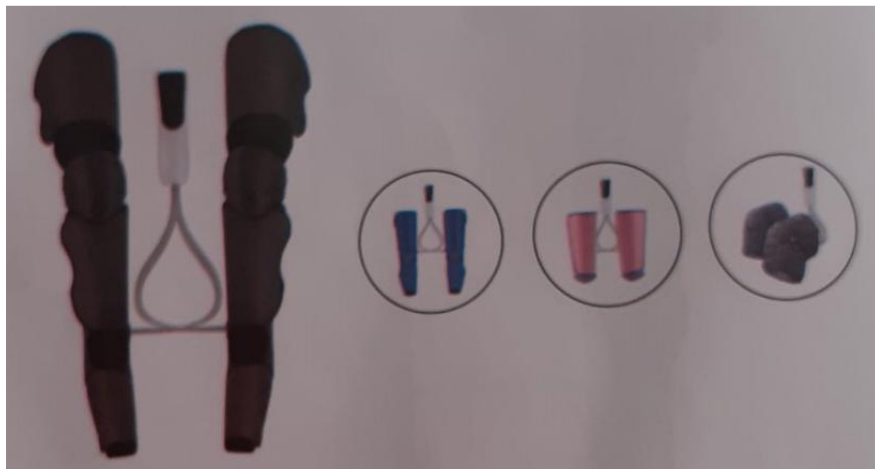

Предпазни мерки за безопасност

- Не използвайте захранващо напрежение над указаното за този уред
- Не правете опити да ремонтирате или разглобявате уреда. Няма части, които могат да се сервизират от потребителя
- Не използвайте уреда на места където може да стане мокро или влажно. Ако уредът се намокри, не го използвайте
- Спрете използването на уреда незабавно, ако почувствате неудобство или се появят някакви необичайни усещания
- Не използвайте този уред в среда с висока температура
- Не използвайте този уред, ако в момента сте бременна или имате менструация
- Не поставяйте уреда на място, където може да бъде в контакт със запалими материали, експлозивни вещества или химикали
- Не докосвайте уреда с остри предмети или с такива, рискови за повреди
- Не използвайте този уред, ако някое от изброените по-долу се отнася за вас:
 - Кожата ви е инфектирана, подута, изгорена или увредена по друг начин
 - Имате пейсмейкър или друг медицински имплант
 - Страдате от сърдечно заболяване
 - Костите ви са чупливи или контузени
 - Страдате от рак
 - Сте подложени на лечение или кръвното ви налягане не е нормално
 - Страдате от остеопороза

Управление

1. Натиснете бутона за включване/изключване, за да влезете автоматично в бавен хоризонтален режим. Въздушното налягане е на слаба позиция по подразбиране, а нагревателната функция е в изключено състояние.
2. Натиснете превключвателя за режим, за да преминете през цикъла на трите режима (успокояващ, релаксиращ и интелигентен)
3. Натиснете превключвателя за въздушно налягане и трите сили (силна, средна и слаба) се превключват циклично
4. Натиснете превключвателя за нагряване да превключва температурата на две нива (високо ниво и ниско ниво) циклично
5. Натиснете бутона за включване/изключване, за да изключите и прекратите работния режим

Работа с уреда

1. Плъзнете краката си във всеки масажор, като ги задържите плоско изравнени на дъното. Имайте предвид, че всеки от тях е маркиран с L и R за всеки крак.
2. Използвайте лентата за да закрепите плътно крака си в масажора.
3. Раздвижете крака за да се уверите, че сте затегнали масажора сигурно.
4. Свържете двете връзки за въздушно налягане към контролния панел.
5. Натиснете бутона за включване, докато LED покаже On.
6. Настройте силата и режима на въздушното налягане с ръката си и на LCD екрана виждате своите действия.

Забележка: уредът автоматично ще се изключи след 15 минути.

За най-добри резултати, не използвайте масажора повече от 1 час



Грижа и поддръжка

- Съхранявайте уреда на сухо място, далеч от влага и пряка слънчева светлина
- Забърсвайте със суха кърпа

Отстраняване на малки повреди

Проблем	Причина	Решение
Уредът не работи	Устройството не е включено към източник на захранване	Уверете се, че уредът е напълно включен към източник на захранване
	Бутонът за включване не е бил натиснат	Натиснете бутона за включване
Уредът внезапно спря да работи	Уредът е работил повече от 15 минути	Пуснете отново за да подновите използването му

Спецификации

- Номинално напрежение: 12V 2A
- Консумирана мощност: 24W
- Време по подразбиране: 20 min